


Breezhaler 膠囊型乾粉吸入劑 衛教單張


- Ultibro® 110/50 mcg/cap 昂帝博
- Onbrez® 150 mcg/cap 昂舒
- Enerzair® 150/50/80 mcg/cap 艾能舒

【用法用量】吸入器每天吸一次，一次一粒膠囊。


【使用方法】

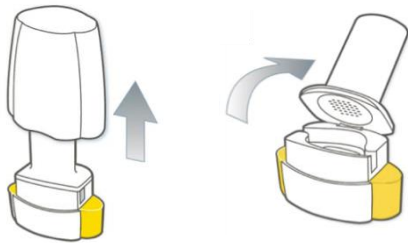


- ✓ 移除帽蓋，並打開吸入器。

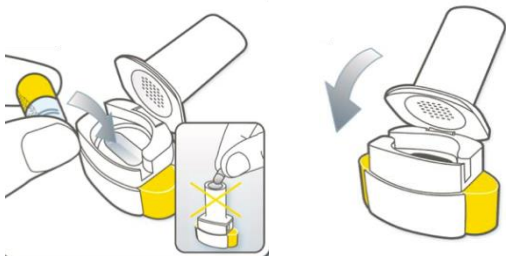

- ✓ 以乾燥的手將膠囊由鋁箔片中撕開取出，裝入吸入器中央凹槽內。
(切勿將膠囊壓出鋁箔。不可吞服膠囊。)
- ✓ 蓋上吸入器，並聽到『喀』一聲。

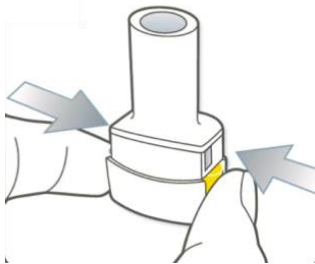

- ✓ 直立握住吸入器，口含器朝上。同時緊壓兩側的按鈕以刺破膠囊。
- ✓ 按壓一次後完全放開按鈕。
(只可刺破膠囊一次)

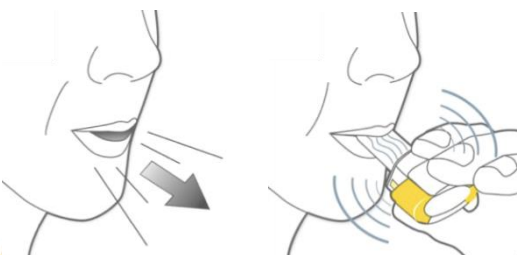


- ✓ 口含器放入嘴巴前，將氣完全吐出。
(不可對著口含器吐氣)
- ✓ 將口含器放入口中，緊閉雙唇含住口含器。



- ✓ 快速吸氣，儘可能深深吸氣。
(吸藥時，膠囊會在吸入器中旋轉，您會聽見呼呼的聲音，且覺得有藥味。)
- ✓ 如果沒有聽見呼呼的聲音，請打開吸入器並小心輕拍底座來使膠囊鬆動，重覆前面步驟吸藥。



- ✓ 吸入器由口中移出，閉氣 5 - 10 秒後緩慢呼氣。
- ✓ 打開吸入器檢視膠囊中是否仍有粉末殘留。
- ✓ 若膠囊中仍有粉末，請關上吸入器。重覆吸藥步驟。多數的人在吸 1 - 2 次就能吸完。

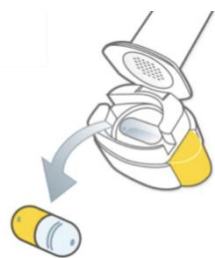

- ✓ 打開吸入器，將空膠囊倒出並丟棄。
- ✓ 關上吸入器並蓋上帽蓋。
- ★ 若您的藥物為 **Enerzair 艾能舒**，使用後請以清水漱口並吐出。

【確認用藥】



吸藥時
耳聽呼呼聲



吸藥後
嘴嚐藥味



用藥後膠囊
透明無藥粉

【保存方式】

1. 膠囊應存放在鋁箔片中防潮，使用前才取出。
2. 以乾淨、乾燥的無塵布擦拭口含器內外，以去除任何的殘留粉末，切勿以水清洗吸入器。