

□ **Spiriva® Respimat 適喘樂**
 (2.5 mcg Tiotropium)


□ **Spiolto® Respimat 適倍樂**
 (2.5 mcg Tiotropium/Olodaterol)

吸入器 衛教單張
 (可提供 60 噴)



每周用濕布擦拭口含器哦！

藥罐

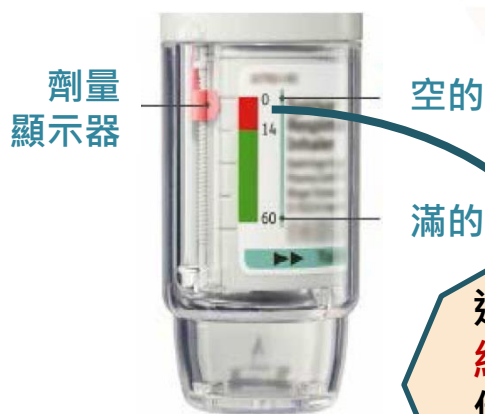

進入刻度上的
紅色區域時，
 代表大約還剩
14 噴的藥量

【使用方法】

裝填藥罐：

拔

拔蓋：
 按住安全扣並拔下
 透明底座



裝

裝藥：
 將藥罐的**窄端**開口
 推向吸入器



壓

將**藥罐完全壓到底**，
 推入吸入器，並聽
 到「**卡嗒**」聲，裝
 回透明底座



吸入準備：新開封使用前，才須執行此準備步驟

轉

蓋子蓋緊，將透明底座依照箭頭指示方向旋轉半圈且聽到「卡嗒」聲



開

打開蓋子



噴

將吸入器朝向地面，按壓給藥按鈕



重複上列步驟致出現霧狀藥液後，再重複上列步驟 3 次，即可開始使用吸入器

- ◆ 若您的吸入器已超過 7 天未使用，先向地面噴一次；若已超過 21 天未使用，請重複此「吸入準備」步驟
- ◆ 吸入劑從初次使用算起，最多只能用 3 個月

使用吸入器：若需使用第二噴，不須休息，請重複此步驟

轉

開

同上述步驟，旋轉半圈，打開蓋子

吸

1. 將肺中空氣呼出
2. 雙唇含住口含器，但請勿遮住通氣孔
3. 由口腔緩慢深吸氣時，按下給藥按鈕並繼續吸氣
4. 閉氣至少 10 秒鐘後，恢復正常呼吸

